

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Explicația simbolurilor

AVERTISMENT - Avertismente privind posibilele riscuri de accident grav sau vătămare corporală.

ATENȚIE - Avertismente privind posibilele riscuri de accident sau vătămare corporală.

NOTIFICARE - Avertismente privind posibilele daune tehnice.

INFORMAȚII - Informații suplimentare despre montare/utilizare.

1 Componente individuale

1.1 Componente individuale

Pentru componentele individuale disponibile, consultați catalogul.

1.2 Accesorii

21A13=4 Piesă de conectare pentru cârlig

Accesoriile nu sunt incluse în livrare. Acestea trebuie comandate separat.

2 Descriere

2.1 Indicații de utilizare

Cârligele Ottobock 10A71=* și 10A81=* MovoHooks 2Grip trebuie utilizate exclusiv pentru adaptarea exoprotezică a amputării membrului superior.

2.2 Domeniu de aplicare

Cârligele Ottobock MovoHooks 2Grip sunt concepute pentru fabricarea unei proteze de braț controlate prin cablu. Pentru aplicații intensive, Ottobock recomandă modelele din oțel inoxidabil. Cârligele acționate prin cablu din metal ușor sunt potrivite pentru utilizare ușoară până la moderată.

2.3 Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să informați pacienții dumneavoastră cu privire la următoarele instrucțiuni de siguranță:

AVERTISMENT

Risc de accident la conducerea unui autovehicul. Capacitatea unei persoane cu amputație a extremității superioare de a conduce un vehicul este determinată de la caz la caz. Factorii includ tipul de montaj (nivelul amputării, unilateral sau bilateral, afecțiunile membrului rezidual, designul protezei) și capacitățile persoanei amputate. Toate persoanele sunt obligate să respecte legile

naționale și statale privind conducerea autovehiculelor atunci când conduc autovehicule. În scopuri de asigurare, șoferii trebuie să își examineze și să își aprobe capacitatea de conducere de către un centru de testare autorizat.

În general, se recomandă ca vehiculele să fie echipate profesional pentru a satisface nevoile individuale ale fiecărui utilizator (de exemplu, furcă de direcție, transmisie automată). Conducerea fără riscuri trebuie asigurată chiar și atunci când proteza nu funcționează.

ATENȚIE

Aveți grijă când manipulați cârligele acționate prin cablu. Cârligele au contururi ascuțite. Utilizarea neîndemânatică poate provoca rănirea utilizatorului sau a altor persoane.

ATENȚIE

Risc de prindere între brațele/vârfurile degetelor. Rănire din cauza prinderii unor părți ale corpului.

- Asigurați-vă că nicio parte a corpului nu se află între brațele/vârfurile degetelor atunci când utilizați produsul.

ATENȚIE

Risc de accidentare ca urmare a solicitării excesive. Componentele protetice Ottobock descrise aici au fost dezvoltate pentru activități zilnice și nu trebuie utilizate pentru activități neobișnuite, cum ar fi sporturile extreme (alpinism, parapantă etc.).

Manipularea atentă a protezei și a componentelor acesteia nu numai că crește durata lor de viață, dar, mai presus de toate, asigură siguranța pacientului.

În cazul în care componentele protetice sunt supuse unor solicitări neobișnuite (cum ar fi o cădere), contactați imediat protetistul și solicitați inspectarea componentelor pentru a depista eventuale deteriorări. Dacă este necesar, protetistul responsabil va preda proteza către service-ul Ottobock.

INFORMAȚII

Abateri de culoare apar în funcție de material și de procesare. Acestea nu afectează calitatea produsului.

AVERTISMENT

Risc de coroziune. Componentele protetice nu trebuie expuse la elemente corozive cum ar fi apa dulce, apa sărată și acizii. Utilizarea acestui dispozitiv medical în astfel de condiții de mediu va anula toate reclamațiile împotriva TheraNova, respectiv Ottobock. Adaptarea ramurilor acoperite pentru manipularea substanțelor agresive trebuie verificată de la caz la caz.

AVERTISMENT

Risc de deteriorare din cauza condițiilor de mediu incorecte. Componentele protetice nu trebuie supuse la fum intens, praf, vibrații, șocuri sau temperaturi ridicate. Nu permiteți pătrunderea de resturi sau lichide în componentele protetice. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la funcționarea defectuoasă și deteriorarea protezei.

AVERTISMENT

Risc de deteriorare cauzată de agenți de curățare neadecvați. Utilizarea agenților de curățare agresivi trebuie evitată. Aceștia pot provoca deteriorarea rulmenților, garniturilor și pieselor din plastic. Produsul poate fi curățat doar cu o cârpă umedă și săpun delicat.

2.4 Funcție

Cârligele MovoHooks 2Grip sunt disponibile în următoarele modele:

- 10A71=* Cârlige MovoHooks 2Grip din aluminiu cu ramificații acoperite cu plastic
- 10A81=* Cârlige MovoHooks 2Grip din oțel inoxidabil cu ramificații acoperite cu plastic

Toate cârligele MovoHooks 2Grip sunt disponibile în următoarele modele:

- *=LM12×1.5 stânga, cu filet metric
- *=RM12×1.5 dreapta, cu filet metric
- *=L 1/2"-20 stânga, cu filet în țoli
- *=R 1/2"-20 dreapta, cu filet în țoli

Cârligele MovoHook oferă următoarele avantaje:

- Datorită designului robust, acestea rezistă în mare măsură efectelor forțelor și murdăriei.
- Permit prinderea precisă chiar și a obiectelor mici.
- Oferă o funcție versatilă de prindere.

Pentru deschiderea cârligului se utilizează un sistem de control prin cablu.



O pereche de arcuri determină închiderea automată a cârligului. Lățimea maximă de prindere este de aproximativ 100 mm. Acest lucru permite utilizatorului să prindă obiecte mari și greoaie.

Două niveluri de forță de prindere pot fi selectate prin intermediul perechii de arcuri. Când pârghia cu arc este setată în poziția proximală, forța de prindere este mai mică (Fig. 1, poz. A). Această setare este destinată utilizării zilnice obișnuite și necesită mai puțină energie din partea utilizatorului.

Când pârghia cu arc este setată în poziția distală, forța de prindere este mai mare (Fig. 2, poz. B).

Obiectele alungite, de exemplu o pilă fără mâner, pot fi fixate în adâncitura dintre cele două ramuri (Fig. 3).

Cârligele Ottobock 10A71 și 10A81 MovoHooks 2Grip au ramuri acoperite. Acest lucru oferă o aderență și un suport sporite pentru susținerea obiectelor.

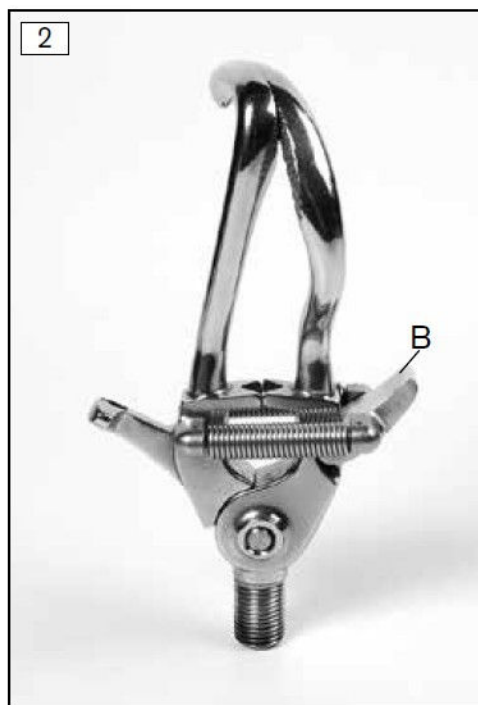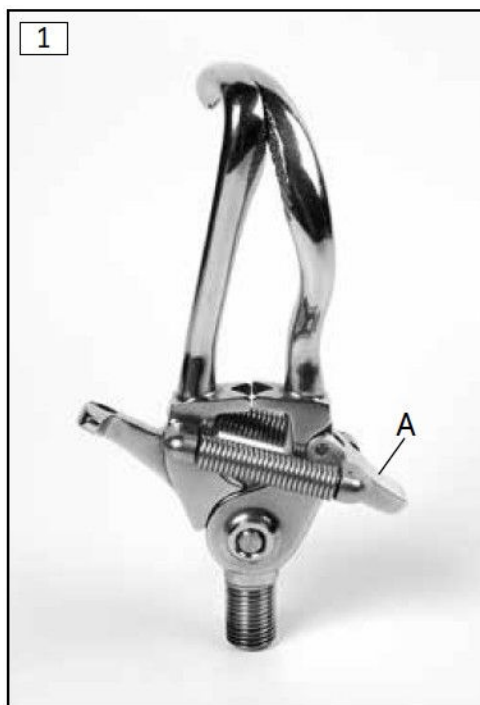

3 Date tehnice

Număr articol		10A71=*	10A81=*
Greutate [g]		130	270
Înălțime totală [mm]		142	
Lățime deschidere [mm]		100	
Forțe de prindere [N]	Poz. A	20	
	Poz. B	40	

4 Manipulare

4.1 Asamblare

Cârligele MovoHooks 2Grip trebuie atașate la o unitate pentru încheietura mâinii Ottobock.

Piesa de conectare 21A13=4 este necesară pentru adaptarea cârligelor la un ham 21A35=* / 21A36=*.

4.2 Instrucțiuni de întreținere

Datorită rulmenților glisanți inovatori, cârligul nu necesită întreținere.

Eliminare

În unele jurisdicții nu este permisă eliminarea produsului împreună cu deșeurile menajere nesortate. Eliminarea necorespunzătoare poate fi dăunătoare sănătății și mediului. Respectați informațiile furnizate de autoritățile responsabile din țara dumneavoastră cu privire la procedurile de returnare, colectare și eliminare.

5 Informații legale

Toate condițiile legale sunt supuse legislației naționale respective a țării de utilizare și pot varia în consecință.

5.1 Răspundere

Producătorul își asumă răspunderea numai dacă produsul este utilizat în conformitate cu descrierile și instrucțiunile furnizate în acest document.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea acestui document, în special din cauza utilizării necorespunzătoare sau a modificării neautorizate a produsului.

5.2 Conformitate CE

Produsul îndeplinește cerințele Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale. Declarația de conformitate CE poate fi descărcată de pe site-ul web al producătorului.