


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DESCRIERE

Dispozitivul este un picior protetic cu piramidă-tată integrată. Este compus dintr-o lamă dublă și una inferioară, fixată cu șuruburi pe călcâi. Lama inferioară include un vârf tip sanda și o lamă compozită pe întreaga lungime.

Dispozitivul este format din următoarele componente (**Fig. 1**):

- A. Adaptor piramidă-tată
- B. Carcasa piramidei
- C. Capacul piramidei
- D. Lama C superioară
- E. Lama C inferioară
- F. Lama inferioară
- G. Șuruburile lamei inferioare
- H. Vârf reglabil

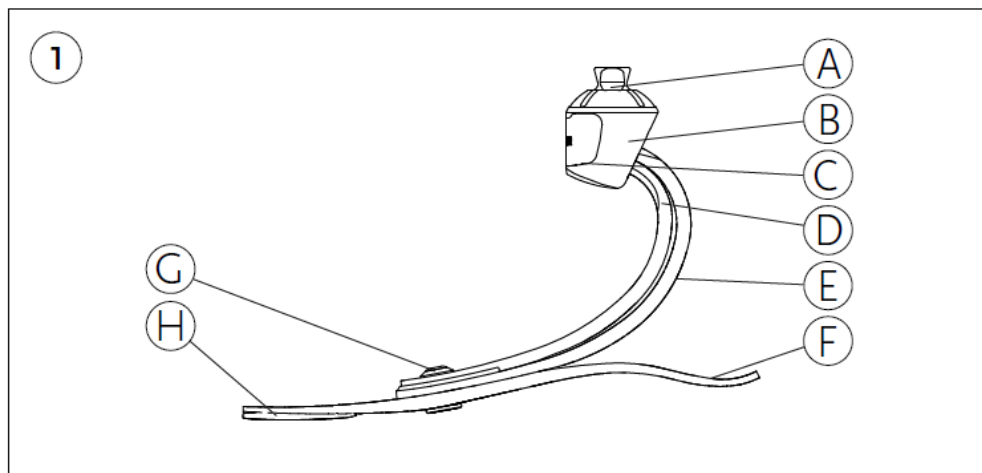

Acest dispozitiv trebuie utilizat împreună cu o husă pentru picior și o șosetă Spectra.

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Dispozitivul este conceput ca parte a unui sistem protetic care înlocuiește funcția labei piciorului și gleznei unui membru inferior lipsă.

Caracterul adecvat al dispozitivului pentru proteză și pentru pacient trebuie evaluat de către un profesionist din domeniul medical.

Dispozitivul trebuie montat și reglat de către personalul medical.

Indicații de utilizare și grup de pacienți țintă

Pierderea, amputarea sau deficiențe ale membrelor inferioare

Nu există contraindicații cunoscute

Dispozitivul este destinat utilizării cu impact redus până la ridicat – de exemplu, mersul pe jos și alergarea ocazională.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Atenționare: Utilizarea unui dispozitiv protetic pentru membrele inferioare implică un risc inerent de cădere, care poate duce la răniri.

Personalul medical trebuie să indice pacientului toate informațiile din acest document care sunt necesare pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului.

Avertisment: În caz de modificare funcțională sau pierderi funcționale sau dacă dispozitivul prezintă semne de deteriorare sau uzură care îi afectează funcțiile normale, pacientul trebuie să oprească utilizarea dispozitivului și să contacteze personalul medical.

Acest dispozitiv este destinat utilizării de către un singur pacient.