

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


DESCRIERE

Dispozitivul este o pompă mecanică de vacuum, neinvazivă, destinată suspensiei protetice asistate de vid.

Suspensia se obține prin acționarea unei pompe care extrage aerul afară din priză la fiecare etapă, creând un vacuum crescut în interiorul interfeței prizei.

Componente (**Fig. 1**)

1. Carcasa membranei
2. Port de intrare
3. Port de evacuare
4. Supapă tip cioc de rață
5. Șurub
6. Pernă de protecție
7. Tub
8. Colier pentru tub

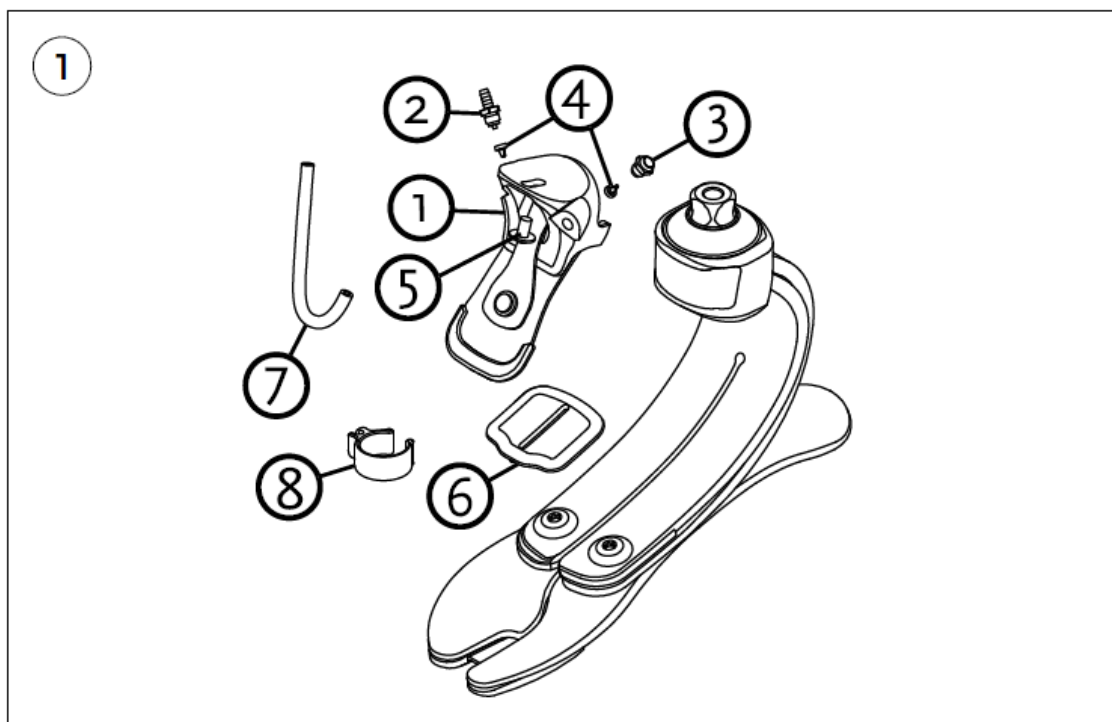

UTILIZARE PRECONIZATĂ

Dispozitivul este conceput ca parte a unui sistem protetic care asigură suspendarea prin presiune subatmosferică.

Caracterul adecvat al dispozitivului pentru proteză și pentru pacient trebuie evaluat de către un profesionist din domeniul medical.

Dispozitivul trebuie montat și reglat de către personalul medical.

Dispozitivul este conceput pentru a fi utilizat împreună cu piciorul Pro-Flex XC sau Pro Flex XC Torsion și husa pentru picior corespunzătoare, precum și un set Unity Valve Kit pentru conectarea la o mufă de suspensie cu o căptușeală Iceross® Seal-In Liner.

Indicații de utilizare

Amputarea membrelor inferioare și/sau deficiență congenitală

Nu există contraindicații cunoscute

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Personalul medical trebuie să indice pacientului toate informațiile din acest document care sunt necesare pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului.

Avertisment: În caz de modificare funcțională sau pierderi funcționale sau dacă dispozitivul prezintă semne de deteriorare sau uzură care îi afectează funcțiile normale, pacientul trebuie să oprească utilizarea dispozitivului și să contacteze personalul medical.

Acest dispozitiv este destinat utilizării de către un singur pacient.