

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ÎNGRIJIREA GENUNCHIULUI PROTETIC CAPITAL COLLEGE PARK

În cazul în care nu este aplicat un înveliș cosmetic, puteți curăța genunchiul protetic Capital College Park ștergându-l cu o lavetă moale care nu lasă scame. Nu aplicați niciodată substanțe chimice dure.

UTILIZARE ÎN APĂ

Genunchiul protetic Capital a fost aprobat pentru utilizare în apă dulce.

- Genunchiul protetic trebuie comutat în modul de blocare atunci când se utilizează în sau în apropierea apei.
- Dați dovadă de prudență atunci când mergeți pe suprafețe ude.
- După ce genunchiul protetic intră în contact cu umezeală, uscați-l ștergându-l cu o lavetă fără scame.

ATENȚIONĂRI

- Evitați pericolele de prindere! Nu amplasați degetele în apropierea zonei de flexie a genunchiului protetic.
- Raportați întotdeauna imediat orice motive de îngrijorare tehnicianului dumneavoastră protezist, incluzând, fără limitare: zgomot, pierdere bruscă a funcționalității, aderență etc.
- Nu încercați niciodată să ajustați genunchiul protetic Capital College Park pe cont propriu. Ajustările genunchiului protetic Capital College Park trebuie efectuate doar de către un profesionist calificat.
- Nu dezasamblați genunchiul protetic. Tehnicianul dumneavoastră protezist poate contacta College Park pentru a programa o reparație sau o înlocuire.
- Nu expuneți acest produs la materiale corozive, apă sărată sau valori extreme ale pH-ului.
- Agenții contaminanți, precum murdăria, și utilizarea lubrifianților sau pulberilor pot afecta funcționalitatea genunchiului protetic și cauza defecțiuni.
- Nu utilizați aer comprimat pentru a curăța genunchiul protetic deoarece acest lucru poate împinge murdăria în interiorul genunchiului.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni tehnice sau utilizarea acestui produs în afara domeniului de aplicare al garanției sale limitate poate cauza vătămări sau deteriorarea produsului.

CONDIȚII DE MEDIU


Temperatură de funcționare: între -7 și 55 °C (20 – 130 °F)

UTILIZAREA GENUNCHIULUI PROTETIC CAPITAL COLLEGE PARK

Genunchiul protetic Capital College Park are trei moduri de funcționare. Pentru a schimba modul, apăsați dispozitivul de blocare al comutatorului de mod, apoi rotiți comutatorul în poziția din stânga, centru sau dreapta. Când este aliniat, dispozitivul de blocare se va fixa în poziție cu un clic.


MODUL DE BLOCARE

Când comutatorul este deplasat spre stânga, genunchiul protetic asigură rezistență crescută la flexie. Acesta va continua să se extindă până când este atinsă extensia completă (vezi figura de mai jos).

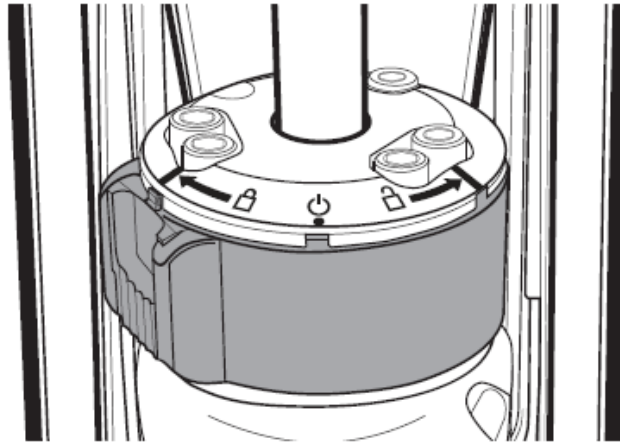


MODUL DE MERS NORMAL

În poziția centrală, genunchiul protetic funcționează conform setărilor hidraulice de rezistență la flexia de balans, extensia de balans și flexia de sprijin (vezi figura de mai jos).

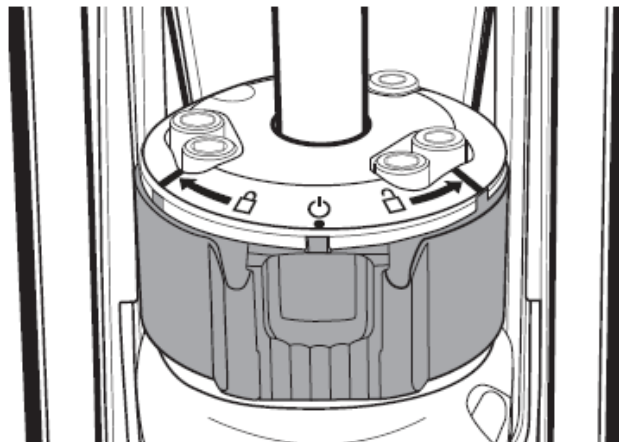

MODUL DE BALANS LIBER

Când comutatorul este deplasat spre dreapta, flexia de sprijin este ocolită. Acest lucru permite mișcarea liberă atât în flexie, cât și în extensie (vezi figura de mai jos).

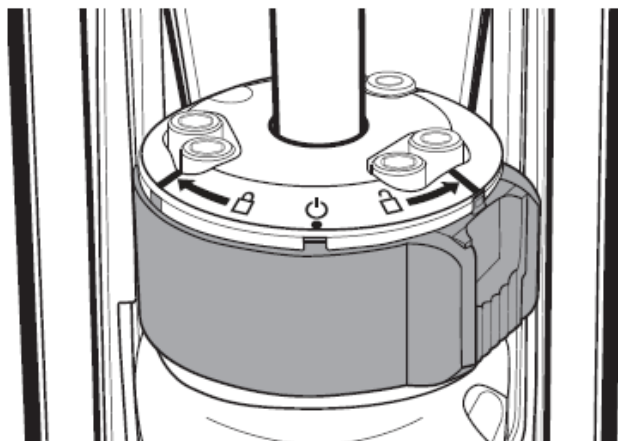

Atenție: Pentru a preveni colapsul brusc, utilizatorii trebuie să dea dovadă de prudență atunci când aplică greutate pe genunchi în timpul modului de balans liber.